


Prefert® Vaginal Gel




Quick start to use Prefert®:

- 5 min
-
-
-
-

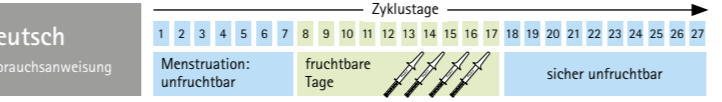

Prefert® Vaginal Gel Gleitmittel bei Kinderwunsch
Gebrauch lesen!
Anwendungshinweise vor Gebrauch lesen!
Wirkungsweise: Prefert® fördert die Spermienaktivität zum Zeitpunkt der Ovulation:
 • gibt den Spermien eine optimale Umgebung
 • idealer pH-Wert zur natürlichen Befruchtung
 • verbessert die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu klassischen Gleitmitteln
 • reduziert die osmotische Barriere für Spermien
 • verbessert die Osmolarität
Anwendungszeit: Zur vorübergehenden Anwendung an den fruchtbarsten Tagen des weiblichen Zyklus (Zeitpunkt der Ovulation).

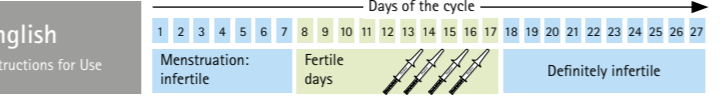

Prefert® Vaginal Gel Lubricant when trying to conceive
Note: Please read instructions before use!
Mode of action: Prefert® promotes sperm activity at the time of ovulation:
 • Provides an optimal environment for sperm
 • ideal pH for natural conception
 • Improves mobility of sperm in comparison to classical lubricants
 • Reduces the osmotic barrier for sperm
 • Improves osmolarity
When to use: For temporary use on the 3 most fertile days of the female cycle (time of ovulation).



Prefert® Gel vaginal Lubrifiant vaginal pour désir d'enfants
Veillez lire les consignes avant l'utilisation !
Mode d'action Prefert® favorise l'activité des spermatozoïdes au moment de l'ovulation :
 • apporte aux spermatozoïdes un environnement optimal
 • pH idéal pour la fécondation naturelle
 • améliore la mobilité des spermatozoïdes en comparaison avec les lubrifiants classiques
 • réduit la barrière osmotique pour les spermatozoïdes
 • améliore l'osmolarité
Moment de l'application : Pour usage passager aux 3 jours les plus




Prefert® Gel vaginale Lubrificante vaginale ideale quando si desidera il concepimento
Leggere le istruzioni prima dell'uso!
Modo d'azione: Prefert® favorisce l'attività degli spermatozoi al momento dell'ovulazione:
 • Crea un ambiente ottimale per gli spermatozoi
 • Valore di pH ideale per il concepimento naturale
 • Migliora la mobilità degli spermatozoi in confronto ai lubrificanti classici
 • Riduce la barriera osmotica agli spermatozoi
 • Migliora l'osmolarità
Quando usarlo: Uso transitorio nei 3




Prefert® Gel vaginal Lubricante vaginal al intentar la concepción
¡Lea las instrucciones de aplicación antes del uso!
Modo de actuación: Prefert® estimula la actividad del espermia en el momento de la ovulación:
 • Proporciona el entorno óptimo para los espermatozoides
 • Posee el valor pH ideal para la fecundación natural
 • Mejora la movilidad de los espermatozoides en comparación con los lubricantes convencionales
 • Reduce la barrera osmótica para los espermatozoides
 • Mejora la osmolaridad
Periodo de uso: Para una aplicación temporal durante los 3 días más fér




Prefert® Vaginale gel Vaginaal glijmiddel bij kinderwens
Lees vóór gebruik de gebruiksinstructies door!
Werking: Prefert® bevordert de sperma activiteit op het moment van de ovulatie:
 • geeft het sperma een optimale omgeving
 • ideale pH-waarde voor natuurlijke bevruchting
 • verbetert de beweeglijkheid van het sperma vergeleken met klassieke glijmiddelen
 • vermindert de osmotische barrière voor het sperma
 • verbetert de osmolariteit
Gebruik: Op de 3 vruchtbare dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van

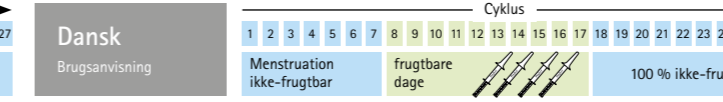


Prefert® Vaginalgel Vaginalt glijdemiddel ved ønske om graviditet
Læs brugerinstruktioner før brug!
Virkemåde: Prefert® aktiverer sædcellerne på tidspunktet for æglosningen
 • Giver sædcellerne et optimalt miljø
 • Ideel pH-værdi til naturlig befrugtning
 • Forbedrer sædcellernes bevægelighed sammenlignet med de klassiske glijdemidler
 • reducerer den osmotiske barriere for sædceller
 • forbedrer osmolariteten
Tidspunkt for anvendelse: På de 3 mest frugtbare dage i den kvindelige cyklus (tidspunktet for æglosning).

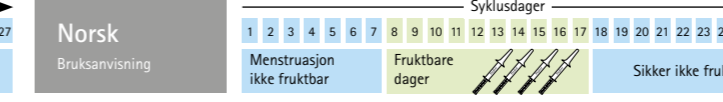


Prefert® Vaginal gel Vaginalt glijdemiddel ved ønske om barn
Merk: Les bruksanvisningen før bruk.
Virkemåte: Prefert® fremmer spermaktivitet på tidspunktet for egglosning:
 • Gir sperma optimale omgivelser
 • Ideell pH-verdi til naturlig befruktning
 • Forbedrer spermaets bevegelighet sammenlignet med klassiske glijdemidler
 • Reduserer den osmotiske barrieren for sperma
 • Forbedrer osmolariteten
Bruktid: På de 3 fruktbarste dagene i syklusen (tidspunkt for

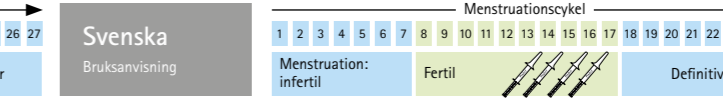


Prefert® Vaginalgel Vaginalt glijdemiddel vid ønskan att bli gravid
Läs anvisningarna före användning!
Verkningsmekanism: Prefert® främjar spermieaktiviteten vid tiden för ägglossningen
 • ger spermerna en optimal miljö
 • idealiskt pH-värde för naturlig befruktning
 • förbättrar spermernas rörlighet jämfört med klassiska glijmedel
 • minskar spermernas osmotiska barriär
 • förbättra osmolariteten
Användningstidpunkt: De 3 mest fertila dagarna i den kvinnliga menstruationscykeln (tiden för ägglossning). Får bara användas en gång inom 24 timmar.

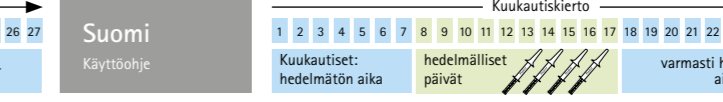

Prefert® Emätinegeeli Liukuvoide raskautta suunnitteleville
Luue käyttöohjeet ennen käyttöä!
Vaikutus: Prefert® tukee siittiöiden toimintaa ovulaatioajankohdanta.
Käyttö: Vie sisään 5 minuuttia ennen sukupuoliyhdyntää.
Etter bruk kastes den tomme sprøyten i husholdningsavfallet.
Rengjør og skyl vaginalapplikatoren med varmt vann, og skyl godt. Kan brukes om igjen.
Uten parabener. Klinisk testet i Tyskland.
Advarsel: Prefert® vaginal gel er ikke en prevensjonsgel. Prefert® dreper ikke sædceller eller forstyrer sædfunksjonen. Hvis bruk av Prefert® vaginal gel forårsaker iritasjon eller ubehag, stans bruken av dette produktet, og ta kontakt med lege ved behov. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Hvis du nylig har hatt vaginal kirurgi, rådfør deg med lege før bruk. Ikke bruk Prefert® vaginal gel hvis du har en aktiv vaginal infeksjon.

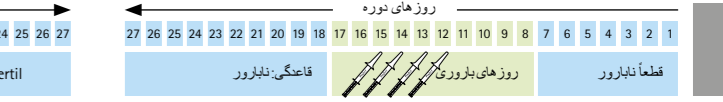


فارسى دستور العمل استفاده
ژل واژینال
لوپریکانت مخصوص لقاح
توجه: پیش از استفاده، دستورالعمل را مطالعه کنید!
طرز کار: Prefert® فعالیت اسپرم را در زمان تخمگذاری افزایش میدهد:
 • محیط بهینه‌ای را برای اسپرم فراهم میکند
 • pH ایده‌آل برای لقاح طبیعی
 • تحرک اسپرم را در مقایسه با لوپریکانت‌های عادی بهبود می‌بخشد
 • سد اسمزی اسپرم را کاهش می‌دهد
 • سد اسمزی را بهبود می‌بخشد
زمان استفاده: برای مصرف موقت در روزهایی از دوره زنازه که بیشترین احتمال باروری وجود دارد (زمان تخمگذاری).

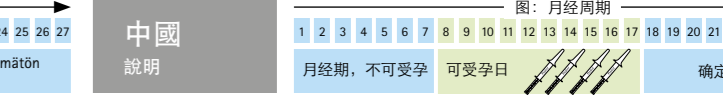

Prefert® 阴道润滑凝胶
期望受孕时使用的阴道润滑剂
请在使用前阅读使用说明!
作用方式: Prefert® 使精子活力延长至排卵期:
 • 为精子提供最佳的环境
 • 保持自然受孕的理想pH值
 • 与传统润滑剂相比，改善精子活力
 • 为精子减少穿透障碍
改进精子穿透力
使用时间: 短期使用时，请在女性月经周期中最容易受孕的日子使用，空的注射器应作为家庭垃圾进行废弃处理。



فارسى دستور العمل استفاده
ژل واژینال
لوپریکانت مخصوص لقاح
توجه: پیش از استفاده، دستورالعمل را مطالعه کنید!
طرز کار: Prefert® فعالیت اسپرم را در زمان تخمگذاری افزایش میدهد:
 • محیط بهینه‌ای را برای اسپرم فراهم میکند
 • pH ایده‌آل برای لقاح طبیعی
 • تحرک اسپرم را در مقایسه با لوپریکانت‌های عادی بهبود می‌بخشد
 • سد اسمزی اسپرم را کاهش می‌دهد
 • سد اسمزی را بهبود می‌بخشد
زمان استفاده: برای مصرف موقت در روزهایی از دوره زنازه که بیشترین احتمال باروری وجود دارد (زمان تخمگذاری).

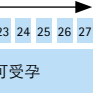

Prefert® 阴道润滑凝胶
期望受孕时使用的阴道润滑剂
请在使用前阅读使用说明!
作用方式: Prefert® 使精子活力延长至排卵期:
 • 为精子提供最佳的环境
 • 保持自然受孕的理想pH值
 • 与传统润滑剂相比，改善精子活力
 • 为精子减少穿透障碍
改进精子穿透力
使用时间: 短期使用时，请在女性月经周期中最容易受孕的日子使用，空的注射器应作为家庭垃圾进行废弃处理。